



## Manuel d'utilisation du système de traitement des apnées du sommeil



# Notifications




---



Révision	Manuel d'utilisation du système de traitement des apnées du sommeil Transcend 103059 Rev D Version publiée le 30.01.13 ; remplace toutes les versions précédentes.
Remarque	Les informations contenues dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans notification préalable.
Marques commerciales	Somnetics® et Transcend® sont des marques commerciales déposées de Somnetics International, Inc.; tous droits réservés.
Droits d'auteur	© Copyright 2013 Somnetics International, Inc.; tous droits réservés.

## Coordonnées de Somnetics International, Inc.

---

Siège social	Somnetics International, Inc.
Adresse électronique	info@somnetics.com
Site Internet	<a href="http://www.mytranscend.com/">http://www.mytranscend.com/</a>
Téléphone	651.621.1800
Numéro gratuit	877.621.9626
Fax	651.204.0064
 0473	 Somnetics International, Inc. 33 5th Avenue NW, Suite 500 New Brighton, Minnesota 55112 USA
	Représentant autorisé (MDD 93/42/CEE) EUROM-Service Ltd. Helmholtzstr. 2 10587 Berlin, Allemagne Téléphone +49303180453

**Rx Only**

## À propos du présent manuel d'utilisation

---

**Remarque:** Ce manuel d'utilisation est conçu pour être imprimé en recto verso (impression des deux côtés de chaque feuille). Si vous ne l'imprimez pas de cette manière, votre tirage contiendra des feuilles blanches.

**Remarque:** Certaines captures d'écran du logiciel utilisées dans le présent manuel peuvent ne pas correspondre à l'affichage réel. L'objectif est uniquement d'améliorer la netteté de l'impression et la clarté de l'affichage à l'écran de ce manuel.

---

# Table des matières

Introduction .....	7
Consignes d'utilisation .....	7
Contre-indications .....	7
Précautions d'utilisation .....	8
Avertissements .....	8
Mises en garde .....	9
Symboles .....	10
Composants du système Transcend .....	11
Accessoires non inclus (vendus séparément) .....	12
Description des composants du système Transcend .....	13
L'appareil Transcend .....	13
Panneau de commande .....	13
Prise d'alimentation et port USB .....	14
Filtre d'entrée d'air .....	15
Assemblage du système Transcend .....	16
Assemblage du système Transcend .....	16
Alimentation du système Transcend .....	17
Utilisation de l'alimentation universelle multiprise (PSA2) .....	18
Utilisation de la batterie Transcend P <sub>4</sub> Overnight™ ou P <sub>8</sub> Multi-Night™ (BAT4 ou BAT8) .....	19
Utilisation de la batterie Transcend P <sub>4</sub> Overnight™ ou P <sub>8</sub> Multi-Night™ en	
complément de l'alimentation secteur .....	19
Utilisation de la batterie Transcend P <sub>4</sub> Overnight™ ou P <sub>8</sub> Multi-Night™ en	
complément de l'adaptateur mobile Transcend .....	20
Explication des voyants optionnels des batteries Transcend P <sub>4</sub> Overnight™ et P <sub>8</sub> Multi-	
Night™ .....	20
Chargement de la batterie Transcend P <sub>4</sub> Overnight™ ou P <sub>8</sub> Multi-Night™ .....	21
Utilisation du système optionnel de fixation sur le bras ou la poitrine avec la	
batterie Transcend P <sub>4</sub> Overnight™ ou P <sub>8</sub> Multi-Night™ .....	22
Utilisation de l'adaptateur mobile Transcend (MPA1) .....	23
Utilisation du système Transcend .....	24
Modes d'utilisation standard .....	24
Début du traitement .....	25
Utilisation de la fonction de phase d'augmentation .....	25
Fin du traitement .....	26
Mode de séchage .....	26
Remplacement du filtre .....	27
Entretien du système Transcend et de ses composants .....	28
Nettoyage de l'extérieur de l'appareil .....	28
Nettoyage des accessoires .....	29
Nettoyage du filtre et de la structure du filtre .....	30
Codes d'anomalie, d'alerte et de rappel .....	32

Codes d'anomalie .....	32
Codes d'alerte .....	33
Rappel de changement du filtre .....	33
Dépannage .....	34
Annexe : références .....	35
Pièces jetables .....	35
Accessoires .....	35
Pièces de rechange .....	35
Annexe : spécifications .....	36
Transcend .....	36
Alimentation universelle pour c.a. PSA2 .....	36
Adaptateur mobile (en option) — MPA1 .....	36
Batteries (en option) — BAT 4, BAT8 .....	36
Les performances de l'appareil Transcend .....	37
Déclaration du fabricant .....	38
<i>Émissions électromagnétiques</i> .....	38
<i>Immunité électromagnétique</i> .....	39
<i>Conformité à la norme CEI 60601-1</i> .....	41
Annexe : garantie limitée .....	43



# Introduction

---

Le système de traitement des apnées du sommeil Transcend fournit une pression positive aux utilisateurs dans une plage de 4 à 20 cmH<sub>2</sub>O, telle que prescrite par le médecin. Les boutons et les voyants lumineux facilitent le contrôle et fournissent un feedback opérationnel. Une prise d'alimentation en courant continu et un port USB sont également inclus dans l'appareil Transcend.

## Consignes d'utilisation

---

Le système de traitement des apnées du sommeil Transcend offre une pression positive pour le traitement des apnées obstructives du sommeil (AOS) chez les adultes de plus de 30 kg. L'appareil est conçu pour être utilisé par les particuliers et les hôpitaux/institutions.

## Contre-indications

---

Le système Transcend est contre-indiqué pour les patients souffrant des pathologies suivantes:

- maladie pulmonaire bulleuse,
- faible pression artérielle pathologique,
- pneumothorax ou pneumomédiastin,
- des cas de pneumocéphale ont été signalés chez certains patients utilisant un système de PAP nasal.

Il faut être vigilant lors de la prescription de PAP à des patients souffrant des pathologies suivantes:

- fuites de liquide céphalo-rachidien (LCR),
- anomalies de la lame criblée,
- antécédents de traumatisme crânien,
- pneumocéphale.

## Précautions d'utilisation

---

Cette section répertorie les avertissements et les mises en garde liés à l'utilisation du système de traitement des apnées du sommeil Transcend. Les indications suivantes s'appliquent à ce manuel:

---

<b>Avertissement</b>	Indique la possibilité d'une blessure grave ou d'un danger mortel pour les autres ou pour vous-même.
----------------------	--

---

<b>Attention</b>	Indique la possibilité d'une blessure mineure ou de détérioration de l'équipement.
------------------	--

---

---

**Remarque:** Indique un conseil, une explication ou une caractéristique qui facilite la compréhension ou l'efficacité de fonctionnement de l'appareil.

---

## Avertissements

---

- Empêchez l'eau de pénétrer dans l'appareil. L'appareil Transcend ne doit pas être conservé dans un environnement humide.
  - Cet appareil n'a pas pour but de maintenir la vie.
  - Le système Transcend doit être configuré et réglé par un fournisseur formé, avant d'être utilisé pour la phase d'augmentation et la pression de traitement.
  - La température de l'air produit par l'appareil peut être supérieure d'environ 5 °C à celle de la pièce. Soyez vigilant si la température de la pièce dépasse 32 °C.
  - Ne bloquez pas et n'obstruez pas les orifices d'expiration de l'interface. Respectez les instructions du fabricant incluses avec l'interface.
  - Cet équipement n'est pas compatible avec l'utilisation d'oxygène. De même, ne l'utilisez pas en présence d'un mélange anesthésique inflammable d'air ou d'oxygène ou avec du protoxyde d'azote.
  - Le système Transcend doit uniquement être utilisé avec les accessoires fournis et recommandés. L'utilisation d'accessoires non recommandés peut provoquer une augmentation des émissions électromagnétiques ou une diminution de l'immunité électromagnétique du système de PAP et peut être potentiellement dangereuse.
  - Le système Transcend n'est pas anti-défibrillateur.
  - Ne tentez pas de stériliser l'appareil Transcend.
  - Ce système est conçu pour être utilisé par un seul patient.
-



- L'appareil doit être utilisé uniquement avec des masques et des connecteurs recommandés par Somnetics ou par un professionnel de la santé. Utilisez le masque uniquement lorsque l'appareil est sous tension et délivre la phase d'augmentation ou la pression de traitement. Les orifices d'expiration reliés au masque ne doivent jamais être bloqués. Explication de cet avertissement : l'appareil est conçu pour fonctionner avec des masques et des connecteurs spéciaux dotés d'orifices d'expiration permettant à l'air de sortir continuellement du masque. Lorsque l'appareil est sous tension et fonctionne correctement, l'air frais de l'appareil chasse l'air expiré, via les orifices d'expiration du masque. Cependant, lorsque l'appareil est hors tension, il n'y a pas assez d'air frais apporté dans le masque et il est possible que de l'air expiré soit de nouveau inhalé. Réinspirer de l'air expiré pendant plusieurs minutes peut parfois entraîner la suffocation.

## Mises en garde

---

- Selon la loi fédérale américaine, cet appareil ne peut être vendu que par un médecin ou sur ordonnance d'un médecin.
  - Branchez le système Transcend uniquement avec l'alimentation, l'adaptateur mobile Transcend ou les batteries fournis par Somnetics. Voir **Annexe : références**.
  - En cas d'irritation des voies respiratoires ou d'irritations cutanées, cessez d'utiliser l'appareil Transcend et contactez votre médecin.
  - N'introduisez pas d'objets dans les systèmes d'entrée ou de sortie d'air de l'appareil.
  - Avant chaque utilisation, vérifiez que le cordon d'alimentation ne présente pas de signes d'usure ou de détérioration. Si nécessaire, remplacez le cordon d'alimentation.
  - Somnetics recommande de remplacer le tuyau (flexible) d'alimentation en air après trois mois d'utilisation.
  - Par souci environnemental, certains éléments et accessoires du système Transcend, dont les batteries optionnelles, doivent être mis au rebut conformément aux réglementations locales en vigueur.
-

## Symboles

---



Attention: consultez les documents joints.



TYPE BF


Pièce appliquée de type BF.

ETL Classified




Intertek

Sceau d'approbation de l'ETL prouvant la qualité, la sécurité et la fabrication professionnelle de ce matériel médical.

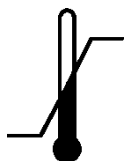

Limites de température maximales et minimales.

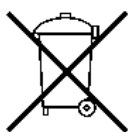

Collecte des équipements électriques et électroniques conformément à la directive européenne 2002/96/CE – Déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).



Consultez les consignes d'utilisation.



Limites d'humidité maximales et minimales.

Non-  
Condensing

**Rx Only**

En vertu de la législation fédérale américaine, ce dispositif ne peut être vendu que par un médecin ou sur ordonnance médicale.

## Composants du système Transcend

À la réception du système Transcend, sortez tous les éléments de l'emballage et vérifiez qu'ils n'ont pas été endommagés pendant le transport. Signalez les dommages ou éléments manquants au fournisseur santé qui vous a procuré l'appareil Transcend.



- Unité de CPAP Transcend
- Flexible standard de 182 cm (remarque : non compatible avec les systèmes Waterless Humidification Systems H<sub>6</sub>B ou H<sub>9</sub>M en option)
- Adaptateur universel de tuyau
- Alimentation universelle multiprise (PSA2)
- Sacoche de voyage
- CD contenant le logiciel
- CD contenant les manuels utilisateur
- Guide de démarrage rapide
- Câble USB

## Accessoires non inclus (vendus séparément)

---

- Waterless Humidification System H<sub>6</sub>B
  - Waterless Humidification System H<sub>9</sub>M
  - Masque nasal (jupe de masque à utiliser avec les systèmes Waterless Humidification Systems H<sub>6</sub>B ou H<sub>9</sub>M)
  - Adaptateur mobile Transcend
  - Batterie Transcend P<sub>4</sub> Overnight
  - Batterie Transcend P<sub>8</sub> Multi-night
  - Étui pour batterie et système de fixation sur le bras ou la poitrine
  - Station de base Transcend
  - Transcend LCD Programming Base Station
  - Transcend Portable Solar Charger (à utiliser comme source de chargement alternative pour les batteries Transcend P<sub>4</sub> et P<sub>8</sub>)
-


# Description des composants du système Transcend

## L'appareil Transcend

L'appareil Transcend est prêt à générer et à réguler le traitement de pression positive continue à fournir à l'interface. Une source d'alimentation externe se branche sur l'appareil Transcend pour l'alimenter.

## Panneau de commande

Le panneau de commande Transcend est composé de deux boutons servant à activer la ventilation et la fonction de phase d'augmentation de la pression. Il est également composé de deux voyants lumineux : un vert pour indiquer les modes de fonctionnement normaux et un jaune pour indiquer les pannes.

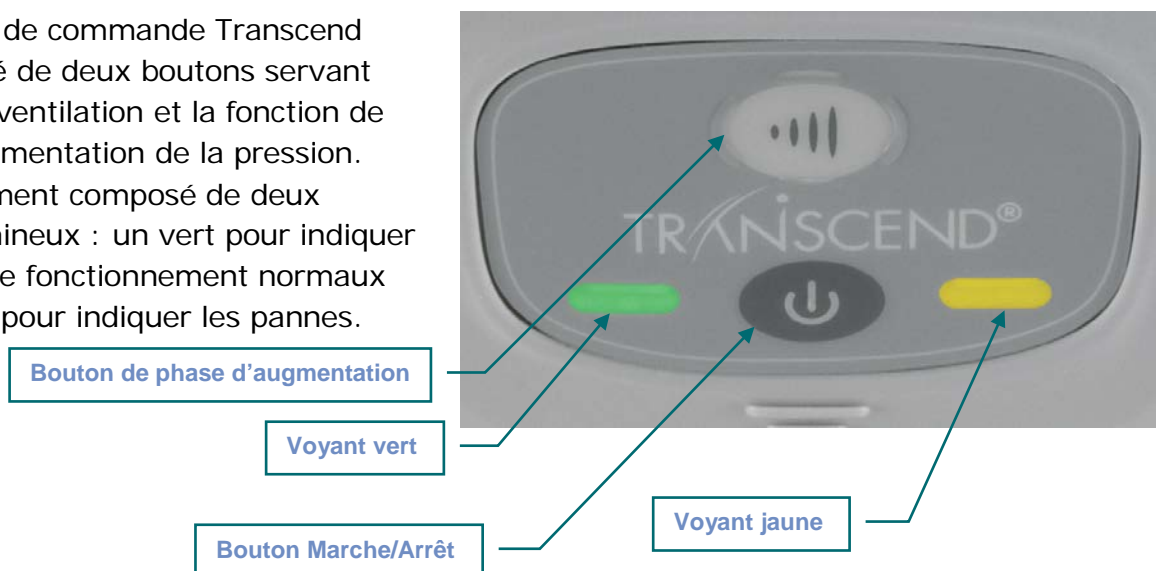

## Prise d'alimentation et port USB

---

La prise d'alimentation reçoit le connecteur cylindrique du câble de sortie d'une source d'alimentation c.c. pour alimenter l'appareil Transcend.

Diverses sources d'alimentation peuvent être utilisées pour faire fonctionner l'appareil Transcend. Un convertisseur de courant alternatif en courant continu est fourni avec l'appareil et doit être utilisé lorsque l'appareil est alimenté sur le secteur (prise murale).

Un adaptateur mobile optionnel permet de brancher l'appareil sur une source d'alimentation c.c. (voiture, camion, camping-car, bateau ou véhicule similaire).

Des batteries Transcend sont disponibles en option pour alimenter le système Transcend.



### Port USB


---

Un port USB mini-AB permet l'échange direct de données entre le système Transcend et un ordinateur via un câble de données USB. L'interface permet au médecin de configurer l'appareil Transcend selon les paramètres de phase d'augmentation et de pression prescrits et fournit au patient des informations de conformité du traitement, qui peuvent être envoyées par courrier électronique au médecin.

## Filtre d'entrée d'air

---

Pendant le traitement, l'air ambiant est entraîné dans le système Transcend via un filtre. Le filtre doit être nettoyé au moins une fois par semaine conformément aux instructions fournies dans ce manuel et doit être remplacé au minimum tous les six mois d'utilisation. Remplacez-le plus souvent si vous le souhaitez.

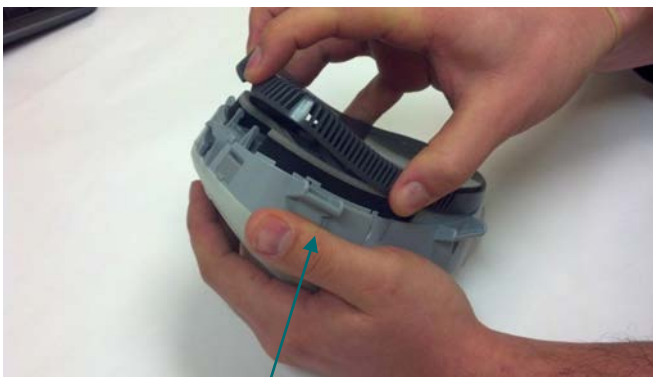

Filtre

## Assemblage du système Transcend

---

L'interface du masque se branche sur l'appareil Transcend via le tuyau d'alimentation en air. L'une des extrémités du tuyau d'alimentation en air se fixe sur l'orifice de sortie de l'appareil Transcend via l'adaptateur universel de tuyau. L'autre extrémité du tuyau se fixe au raccord correspondant sur l'interface.

## Assemblage du système Transcend

---

Pour assembler le système Transcend, procédez comme suit :

1. Fixez l'adaptateur universel de tuyau au tuyau d'alimentation en air de 1,8 m (figure 1).
2. Branchez le masque à l'autre extrémité du tuyau d'alimentation en air.
3. Branchez l'adaptateur universel de tuyau à l'appareil Transcend en veillant à ce qu'il soit bien placé dans l'appareil de CPAP (figure 2).
4. Branchez le câble d'alimentation sur le système Transcend comme indiqué sur la figure 3.
5. Branchez l'alimentation à une prise murale.





## Alimentation du système Transcend

---

L'appareil Transcend peut être alimenté de trois manières:

- À l'aide de l'alimentation universelle multiprise (PSA2)
- À l'aide de la batterie Transcend P<sub>4</sub> Overnight (BAT4) ou P<sub>8</sub> Multi-Night (BAT8) (en option)
- À l'aide de l'adaptateur mobile Transcend (MPA1, en option)

## Utilisation de l'alimentation universelle multiprise (PSA2)

L'alimentation universelle multiprise (PSA2) est composée d'un lot de fiches interchangeables qui contient (3) fiches interchangeables utilisables dans la plupart des pays du monde.

1. Identifiez la fiche à utiliser en fonction du type de prise.
2. Si la prise n'est pas équipée de la bonne fiche, retirez cette dernière en appuyant sur le bouton situé dessus et tournez-la dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle se détache du câble d'alimentation.
3. Pour fixer la fiche souhaitée, alignez les languettes de la fiche sur les interstices de l'alimentation et insérez délicatement la fiche. Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la fiche soit enclenchée (vous entendrez un clic).
4. Branchez le connecteur cylindrique du câble d'alimentation dans la prise d'alimentation située à l'arrière du système Transcend.
5. Insérez l'autre extrémité du câble dans la prise secteur.
6. Les voyants lumineux de l'appareil Transcend clignotent. Une fois la séquence de clignotement de démarrage des voyants terminée, ceux-ci s'éteignent. Cela indique que l'appareil est sous tension et que le mode de veille est activé.

**Remarque :** Utilisez uniquement l'alimentation universelle fournie par Somnetics. N'utilisez pas de convertisseur de secteur, ni de transformateur de tension avec l'alimentation universelle PSA2.

**Remarque :** Assurez-vous que la fiche est bien fixée à l'alimentation avant de brancher l'alimentation dans la prise murale.



## Utilisation de la batterie Transcend P<sub>4</sub> Overnight ou P<sub>8</sub> Multi-Night (BAT4 ou BAT8)

---

Les batteries Transcend P<sub>4</sub> Overnight et P<sub>8</sub> Multi-Night sont des sources d'alimentation optionnelles pour votre appareil Transcend. Pour les utiliser, branchez le câble de sortie de la batterie P<sub>4</sub> ou P<sub>8</sub> sur l'appareil Transcend en insérant le connecteur cylindrique dans la prise d'alimentation de l'appareil. Veillez à ce que la séquence de clignotement de démarrage des voyants ait lieu, cela indique que l'appareil Transcend est alimenté et qu'il est en mode de veille.

---

**Remarque:** Lors de la première utilisation, chargez complètement la batterie. Respectez les instructions de chargement de la batterie fournies dans ce manuel. Ne branchez pas la batterie sur l'appareil Transcend au cours du chargement initial.

**Remarque:** Utilisez la batterie en complément de l'alimentation c.a. si possible. Brancher la batterie en complément de l'alimentation c.a. permet de la recharger pendant le traitement et fournit une alimentation de secours qui permet un traitement ininterrompu en cas de coupure d'électricité.

---

## Utilisation de la batterie Transcend P<sub>4</sub> Overnight ou P<sub>8</sub> Multi-Night en complément de l'alimentation secteur

---

1. Insérez le connecteur cylindrique de l'alimentation secteur universelle dans la batterie.
  2. Insérez le connecteur cylindrique de la batterie dans la prise d'alimentation du système Transcend de manière à ce que le connecteur et le cordon soient orientés vers le haut.
  3. Branchez la prise de l'alimentation secteur universelle dans la prise murale.
  4. Les voyants lumineux de l'appareil Transcend clignotent. Une fois la séquence de clignotement de démarrage des voyants terminée, ceux-ci s'éteignent. Cela indique que l'appareil est sous tension et que le mode de veille est activé.
-

## Utilisation de la batterie Transcend P<sub>4</sub> Overnight ou P<sub>8</sub> Multi-Night en complément de l'adaptateur mobile Transcend

---

**Remarque:** Utilisez la batterie en complément de l'adaptateur mobile Transcend si possible. Brancher la batterie en complément de l'adaptateur mobile Transcend permet de la recharger pendant le traitement et fournit une alimentation de secours qui permet un traitement ininterrompu en cas de coupure d'électricité.

---

1. Insérez le connecteur cylindrique de l'adaptateur mobile Transcend dans la batterie.
2. Insérez le connecteur cylindrique de la batterie dans la prise d'alimentation du système Transcend de manière à ce que le connecteur et le cordon soient orientés vers le haut.
3. Branchez l'adaptateur mobile Transcend dans la prise d'alimentation mobile.
4. Les voyants lumineux de l'appareil Transcend clignotent. Une fois la séquence de clignotement de démarrage des voyants terminée, ceux-ci s'éteignent. Cela indique que l'appareil est sous tension et que le mode de veille est activé.

## Explication des voyants optionnels des batteries Transcend P<sub>4</sub> Overnight et P<sub>8</sub> Multi-Night

---

- Voyant rouge: une lumière rouge fixe indique une panne au niveau de la batterie. N'utilisez pas la batterie et ne la chargez pas lorsque le voyant est rouge. Contactez le fournisseur santé qui vous a procuré la batterie pour la remplacer.
  - Voyant jaune: la batterie est en cours de chargement.
  - Voyant vert: la batterie est chargée.
- 

**Remarque:** Le voyant rouge s'allume brièvement lorsque la batterie est branchée pour la première fois.

**Remarque:** Selon le niveau de chargement de la batterie, un voyant jaune ou vert s'allume lorsque la batterie est utilisée en complément de l'alimentation secteur universelle ou de l'adaptateur mobile Transcend.

**Remarque:** Aucun voyant ne s'allume lorsque la batterie est utilisée comme source d'alimentation unique.

---

## Chargement de la batterie Transcend P<sub>4</sub> Overnight ou P<sub>8</sub> Multi-Night

---

**Remarque:** La durée de vie de la batterie dépend des paramètres de pression et des profils respiratoires.

**Remarque:** Lors de la première utilisation, chargez complètement la batterie. Ne branchez pas la batterie sur l'appareil Transcend au cours du chargement initial.

**Remarque:** Pour préserver au mieux les performances des batteries, Somnetics recommande de les utiliser en complément de l'alimentation secteur universelle ou de l'adaptateur mobile Transcend pendant le traitement, même si la batterie est complètement chargée.

---

- Branchez le connecteur cylindrique de l'alimentation secteur universelle ou de l'adaptateur mobile Transcend à la prise de la batterie P<sub>4</sub> ou P<sub>8</sub>.
  - Branchez l'alimentation secteur universelle ou de l'adaptateur mobile Transcend à une source d'alimentation.
  - Lorsque la batterie est chargée, le voyant passe de jaune à vert.
  - Le chargement d'une batterie complètement déchargée peut nécessiter jusqu'à cinq (5) heures pour la batterie P<sub>4</sub> Overnight et jusqu'à huit (8) heures pour la batterie P<sub>8</sub> Multi-Night.
-

## Utilisation du système optionnel de fixation sur le bras ou la poitrine avec la batterie Transcend P<sub>4</sub> Overnight ou P<sub>8</sub> Multi-Night


---

Glissez la batterie dans l'étui pour batterie et fixez la sangle en velcro pour maintenir le système.

Passez la boucle dans le passant de l'étui pour batterie de manière à ce que le velcro soit orienté face à la batterie.

Tout en orientant la boucle de l'étui vers l'extérieur, passez la sangle autour de votre bras ou de votre poitrine et insérez son extrémité dans la boucle.

Tirez la sangle à travers la boucle et fixez-la sur le velcro. Placez l'étui sur votre bras et réglez la sangle selon vos besoins.

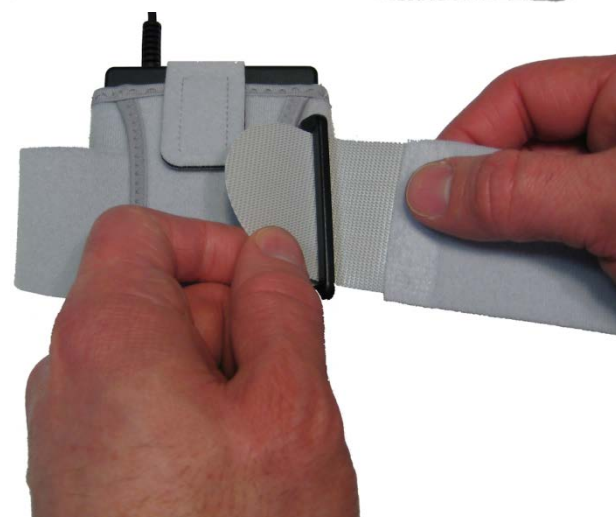

## Utilisation de l'adaptateur mobile Transcend (MPA1)

---

Le système Transcend peut être alimenté à l'aide d'un adaptateur mobile Transcend (en option). Cet adaptateur est fourni avec deux câbles : l'un pour brancher le MPA1 sur l'appareil Transcend et l'autre pour connecter le MPA1 à une prise d'alimentation mobile.

---

**Remarque :** Utilisez uniquement l'adaptateur mobile Transcend fourni par Somnetics.

---

1. Branchez les deux câbles à la base de l'adaptateur mobile Transcend.
2. Insérez le connecteur cylindrique du câble de sortie du MPA1 à la prise d'alimentation de l'appareil Transcend.
3. Insérez le connecteur dans la prise mobile (un allume-cigare, par exemple).
4. Les voyants lumineux de l'appareil Transcend clignotent. Une fois la séquence de clignotement de démarrage des voyants terminée, ceux-ci s'éteignent. Cela indique que l'appareil est sous tension et que le mode de veille est activé.

---

**Remarque:** Veillez à ce que les câbles soient bien branchés sur l'adaptateur mobile Transcend et sur la prise d'alimentation située à l'arrière du système Transcend. Il peut être nécessaire de débrancher et de rebrancher les câbles pour assurer une bonne connexion.

---

# Utilisation du système Transcend

---

Le panneau de commande Transcend est composé de deux boutons servant à activer la ventilation et à lancer la fonction de phase d'augmentation de la pression. Il est également composé de deux voyants lumineux : un vert pour indiquer les modes de fonctionnement normaux et un jaune pour indiquer les pannes. L'état de fonctionnement du système Transcend est indiqué par les voyants lumineux.

Lorsqu'une source d'alimentation est connectée à l'appareil Transcend, les voyants clignotent. Une fois la séquence de clignotement de démarrage des voyants terminée, ceux-ci s'éteignent. Cela indique que l'appareil est sous tension et que le mode de veille est activé. Pendant le traitement, les voyants sont éteints pour ne pas déranger le patient et/ou son conjoint.

---

**Remarque:** Si le système Transcend n'est plus alimenté pendant le traitement, celui-ci reprendra dès que l'alimentation sera rétablie et que vous aurez appuyé sur le bouton Marche/Arrêt. Les voyants lumineux clignoteront de nouveau avant que la ventilation ne soit redémarrée.

---

## Modes d'utilisation standard

---

Le fonctionnement standard est composé de quatre modes :

- |                |  |
|----------------|--|
| <b>Éteint</b>  | Lorsque l'appareil n'est pas branché sur une source d'alimentation, il est hors tension. Les voyants lumineux du panneau de contrôle sont tous deux éteints.   |
| <b>Veille</b>  | Lorsque l'appareil est connecté à une source d'alimentation, les voyants clignotent et l'appareil se met en mode de veille. Le mode de veille est également activé lorsque le patient appuie sur le bouton Marche/Arrêt alors que l'appareil est en marche ou lorsqu'il retire le masque en mode de marche. Tant que l'appareil est alimenté, il reste en mode de veille jusqu'à ce que le mode de marche ou de séchage soit activé. |
| <b>Marche</b>  | Lorsque le mode de marche est activé, la ventilation fonctionne et l'appareil produit la pression de traitement paramétrée. Les voyants restent éteints. Le mode de marche est activé lorsque le patient appuie sur le bouton Marche/Arrêt alors que l'appareil est en mode de veille et que le patient le porte.  |
| <b>Séchage</b> | Pour activer le mode de séchage, appuyez sur le bouton de <b>phase d'augmentation</b> et appuyez en même temps sur le bouton <b>Marche/Arrêt</b> . En mode de séchage, la ventilation fonctionne à faible vitesse pendant 30 minutes. Pendant le mode de séchage, les voyants restent éteints et la pression du ventilateur n'est pas réglée pour fournir un traitement.   |
-



## Début du traitement

Le panneau de commande Transcend est composé de deux boutons servant à activer la ventilation et la fonction de phase d'augmentation de la pression. Il est également composé de deux voyants lumineux : un vert pour indiquer les modes de fonctionnement normaux et un jaune pour indiquer les pannes.



1. Branchez l'appareil Transcend à une source d'alimentation et laissez-le passer en mode de veille.
2. Assurez-vous que votre masque est correctement placé avant de démarrer le traitement.
3. Pour démarrer le traitement, appuyez sur le bouton Marche/Arrêt. Appuyer sur le bouton Marche/Arrêt lorsque l'appareil Transcend est en mode de veille permet de lancer le mode de marche. Le débit d'air commencera lorsque le générateur d'air produira ou augmentera progressivement vers la pression de traitement prescrite.

## Utilisation de la fonction de phase d'augmentation

La fonction de phase d'augmentation permet à l'utilisateur de s'habituer au débit d'air en envoyant d'abord une pression basse, puis en l'augmentant progressivement, pendant que vous vous endormez, pour atteindre la pression qui vous a été prescrite. La pression et le temps de phase d'augmentation minimum sont définis par votre médecin. Si la fonction de phase d'augmentation n'est pas définie par votre médecin, elle ne sera pas disponible.

Pour accélérer le rythme d'augmentation de la pression, maintenez enfoncé le bouton de phase d'augmentation jusqu'à ce que l'appareil atteigne une pression de traitement confortable. Une fois le bouton de phase d'augmentation relâché, l'appareil fonctionne en mode de phase d'augmentation jusqu'à ce qu'il atteigne la pression de traitement prescrite.

1. Vérifiez que l'appareil Transcend est en mode de marche. S'il ne l'est pas, appuyez sur le bouton Marche/Arrêt.
2. Ajustez votre masque de manière à supprimer les fuites.
3. Appuyez sur le bouton de phase d'augmentation. La pression baisse pour atteindre la pression de démarrage de la phase d'augmentation définie par le médecin et augmente progressivement au cours d'une période prédéfinie jusqu'à atteindre la pression de traitement prescrite.

**Remarque:** Le fait d'appuyer rapidement sur le bouton de **phase d'augmentation** pendant que cette fonction est activée n'affecte pas la pression fournie. Pour arrêter la fonction d'augmentation progressive de la pression, mettez l'appareil hors tension en appuyant sur le bouton Marche/Arrêt. Lors de la prochaine mise sous tension de l'appareil, la ventilation fournira la pression de traitement prescrite.

**Remarque:** Si l'appareil n'est plus alimenté pendant la phase d'augmentation, le système Transcend redémarrera à la pression finale prescrite dès que l'alimentation aura été rétablie.

---

## Fin du traitement


---

Pour arrêter le traitement alors que la ventilation fonctionne, appuyez sur le bouton **Marche/Arrêt** pour désactiver la ventilation et replacer l'appareil en mode de veille. Nous conseillons de lancer le mode de séchage après chaque session de traitement afin de sécher l'intérieur de l'appareil.

## Mode de séchage

---

À la fin du traitement, il est conseillé de lancer le mode de séchage. Pour activer le mode de séchage, appuyez sur le bouton de **phase d'augmentation** et appuyez en même temps sur le bouton **Marche/Arrêt**. En mode de séchage, la ventilation fonctionne à faible vitesse pendant 30 minutes. Pendant le mode de séchage, les voyants restent éteints et la pression de la ventilation n'est pas réglée pour fournir un traitement. Le mode de séchage propulse de l'air dans le système afin de supprimer toute trace d'humidité à l'intérieur de l'appareil et du circuit respiratoire. Après un cycle de séchage de 30 minutes, la ventilation s'arrête et l'appareil passe automatiquement en mode de veille.

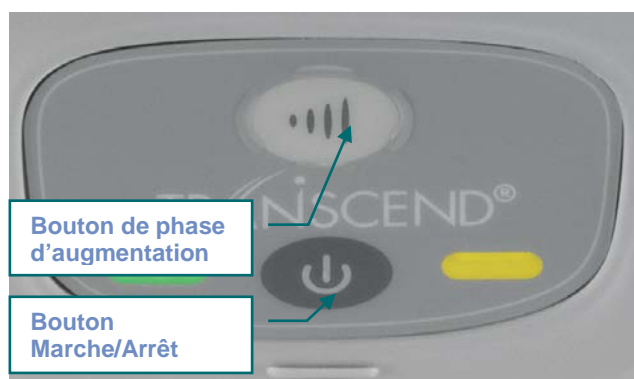




## Remplacement du filtre

Le filtre Transcend doit être remplacé tous les six mois au moins.

1. Retirez la structure du filtre en appuyant doucement sur l'encoche de la structure du filtre. Retirez ensuite la structure du filtre de l'appareil.
2. Pour remplacer le filtre, retirez-le et mettez-le au rebut. Posez un nouveau filtre à la place de l'ancien dans l'appareil Transcend.
3. Insérez la nouvelle structure de filtre dans l'appareil en enclenchant tout d'abord le clip avant. Une fois la partie avant en place, vous pouvez enclencher la fixation arrière. Vérifiez que la structure de filtre est correctement enclenchée avant d'utiliser l'appareil.

**Remarque:** Si vous utilisez une ancienne version de filtre d'entrée d'air : retirez la structure de filtre (la mousse y est fixée) et mettez-la au rebut. Remplacez-la par une nouvelle structure de filtre de l'ancienne version.

**Remarque:** Les filtres d'entrée d'air et les structures de filtre des versions précédentes ne sont pas compatibles avec les systèmes Transcend dernière génération.

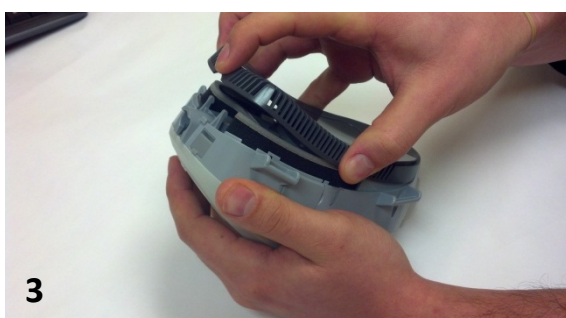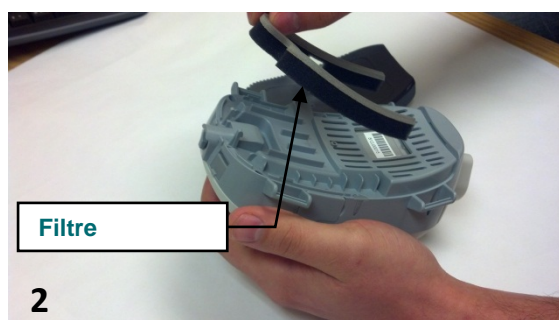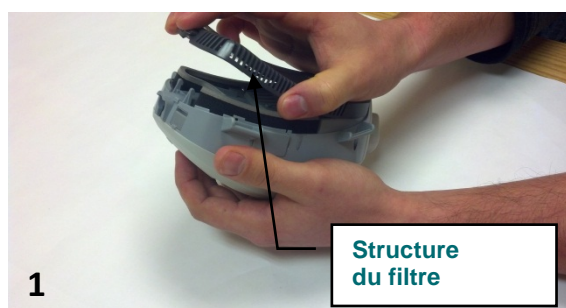

# Entretien du système Transcend et de ses composants

---

Cette section couvre les thèmes suivants:

- **Nettoyage de l'extérieur de l'appareil**
- **Nettoyage des accessoires**
- **Nettoyage du filtre et de la structure du filtre**

## **Avertissement:**

- Débranchez l'appareil Transcend avant de le nettoyer.
- Ne plongez pas l'appareil Transcend, ni son alimentation dans un liquide.
- Empêchez l'eau d'entrer par les ouvertures de l'appareil.
- N'utilisez pas de produits nettoyants abrasifs ou agressifs pour nettoyer l'appareil ou ses composants.
- Ne tentez pas de stériliser l'appareil Transcend.
- Ne posez pas de produits nettoyants, tels qu'un chiffon ou un liquide, sur les connecteurs d'entrée ou de sortie d'air de l'appareil.

## Nettoyage de l'extérieur de l'appareil

---

Procédez comme suit pour nettoyer l'extérieur de l'appareil Transcend.

1. Débranchez l'alimentation de l'appareil avant de le nettoyer et enlevez les câbles d'alimentation.
  2. Mélangez 5 % de détergent liquide doux dans de l'eau distillée (48 ml de détergent liquide par litre d'eau distillée). Les détergents doux doivent contenir des tensioactifs anioniques biodégradables mais pas de phosphate.
  3. Plongez un chiffon en coton non pelucheux dans la solution détergente.
  4. Essorez l'excès d'eau du chiffon et essuyez l'extérieur de l'appareil Transcend, de l'avant vers l'arrière, pendant 20 secondes environ. Frottez assez fermement et veillez à accéder à toutes les surfaces afin de retirer correctement toutes les saletés.
  5. Rincez le chiffon à l'eau claire afin de retirer les résidus de la solution détergente.
  6. Essorez le chiffon et essuyez l'appareil Transcend en frottant doucement de manière à retirer les restes de solution détergente de la surface de l'appareil.
  7. À l'aide d'un chiffon sec, en coton et non pelucheux, essuyez l'appareil jusqu'à ce qu'il soit sec.
-

## Nettoyage des accessoires

Les accessoires suivants doivent être nettoyés à l'aide d'une solution de 5 % de détergent liquide doux mélangé dans de l'eau distillée (48 ml de détergent liquide par litre d'eau distillée). Les détergents doux doivent contenir des tensioactifs anioniques biodégradables mais pas de phosphate. Respectez les étapes suivantes pour nettoyer les accessoires.

Accessoire	Fréquence de nettoyage	Durée de vie du produit
Station de base Transcend	2 fois/mois	2 ans

1. Imbibez un chiffon en coton non pelucheux de solution détergente.
2. Essorez l'excès d'eau du chiffon et essuyez minutieusement chaque surface en faisant des mouvements circulaires ou d'aller-retour. Frottez assez fermement et veillez à accéder à toutes les surfaces afin de retirer correctement toutes les saletés.
3. Rincez le chiffon à l'eau distillée afin de retirer les résidus de la solution détergente.
4. Essorez l'excès d'eau du chiffon et essuyez l'accessoire afin de retirer toute trace de solution détergente sur la surface.
5. Pour sécher les surfaces, essuyez-les avec un chiffon sec, en coton et non pelucheux.
6. Vérifiez que l'accessoire est complètement sec avant de le réassembler ou de l'utiliser.

**Avertissement:** empêchez l'eau ou la solution détergente de pénétrer dans la station de base.

Les accessoires suivants peuvent être entièrement immergés dans la solution détergente décrite précédemment. Suivez les instructions ci-dessous pour procéder correctement au nettoyage.

Accessoire	Fréquence de nettoyage	Durée de vie du produit
Support de tête – systèmes H <sub>6</sub> B et H <sub>9</sub> M	1 fois/semaine	6 mois
Coussinet frontal	1 fois/semaine	6 mois
Coussinet de protection de base pour appareil CPAP	1 fois/semaine	6 mois
Coque du masque	1 fois/semaine	3 mois
Adaptateur universel de tuyau	Tous les jours	3 mois
Tuyau d'alimentation en air	Tous les jours	3 mois

1. Immergez totalement l'accessoire dans la solution détergente.
2. Une fois immergé, essuyez minutieusement la surface de l'accessoire avec un chiffon en coton non pelucheux. Frottez assez fermement et veillez à accéder à toutes les surfaces afin de retirer correctement toutes les saletés.
3. Nettoyez l'intérieur du tuyau d'alimentation en air en remplissant le tuyau de la solution détergente, en bouchant les extrémités et en le secouant.
4. Rincez les accessoires en les immergeant dans de l'eau distillée. Secouez l'accessoire d'avant en arrière pendant 10 secondes environ afin de retirer les résidus de la solution détergente.
5. Rincez le tuyau d'alimentation en air en l'immergeant dans de l'eau distillée. Secouez de haut en bas le tuyau rempli d'eau. Répétez cette action pendant 10 secondes environ afin de retirer les résidus de détergent.
6. Séchez l'accessoire en l'essuyant avec un chiffon sec, en coton et non pelucheux. Laissez sécher l'accessoire à l'air libre aussi longtemps que nécessaire.
7. Séchez l'extérieur du tuyau d'alimentation en air à l'aide d'un chiffon sec, en coton et non pelucheux. Laissez le tuyau sécher à l'air libre jusqu'à ce que l'intérieur du tuyau soit sec. Le temps de séchage dépendra des conditions environnementales.

**Remarque :** il est conseillé de laisser sécher les éléments à l'air libre, à température ambiante pendant 30 à 60 minutes avant de les réassembler ou de les utiliser.

## Nettoyage du filtre et de la structure du filtre

---

Nettoyez la mousse du filtre et la structure du filtre au moins une fois par semaine. Procédez comme suit pour nettoyer :

1. Enlevez tout d'abord le filtre et la structure du filtre de l'appareil (voir **Remplacement du filtre** pour savoir comment retirer et remplacer le filtre).
  2. Mélangez 5 % de détergent liquide doux dans de l'eau distillée (48 ml de détergent liquide par litre d'eau distillée). Les détergents doux doivent contenir des tensioactifs anioniques biodégradables mais pas de phosphate.
  3. Immergez entièrement la **Structure du filtre** dans la solution détergente.
  4. Une fois immergé, essuyez minutieusement la surface de la structure du filtre avec un chiffon en coton non pelucheux. Frottez assez fermement et veillez à accéder à toutes les surfaces afin de retirer correctement toutes les saletés.
  5. Rincez la structure du filtre en l'immergeant dans de l'eau distillée et secouez-la doucement pendant 10 secondes.
  6. Utilisez un chiffon sec, en coton et non pelucheux pour sécher toutes les surfaces de la structure du filtre.
-

7. Pour nettoyer le **Filtre**, immergez tout d'abord un chiffon en coton non pelucheux dans une solution détergente.
8. Essuyez le filtre avec un chiffon afin de retirer tout résidu visible. Essuyez toutes les surfaces pendant 10 secondes minimum.
9. Rincez le chiffon à l'eau distillée afin de retirer les résidus de la solution détergente.
10. Essorez l'excès d'eau du chiffon et essuyez toutes les surfaces du filtre afin de retirer toute trace de solution détergente sur la surface.
11. Pour sécher les surfaces, essuyez-les avec un chiffon sec, en coton et non pelucheux.
12. Laissez le filtre sécher à l'air libre, à température ambiante, pendant environ 30 à 60 minutes avant de le réassembler. Le temps de séchage dépendra des conditions environnementales.
13. Remplacez le filtre et la structure du filtre dans l'appareil Transcend.

**Remarque:** pour nettoyer un filtre d'entrée d'air d'une version précédente, retirez la structure du filtre (la mousse est fixée) et suivez les étapes 2 à 6 ci-dessus. Laissez le filtre sécher à l'air libre pendant 30 à 60 minutes. Le temps de séchage dépendra des conditions environnementales. Remplacez le filtre d'entrée d'air dans le CPAP.

# Codes d'anomalie, d'alerte et de rappel

## Codes d'anomalie

Lorsque l'appareil Transcend rencontre une panne, le processeur se réinitialise et entre dans une boucle de panne. Au cours de cette boucle, le voyant de panne jaune de l'appareil clignote de manière répétée pour indiquer la présence d'une panne spécifique. Si l'appareil a été réinitialisé ou redémarré alors que le mode de panne est activé, le mode de panne reste activé au redémarrage. Pour désactiver le mode de panne, vous devez corriger la panne en maintenant le bouton Marche/Arrêt enfoncé jusqu'à ce que le voyant de panne cesse de clignoter. Lorsque vous relâchez le bouton Marche/Arrêt, le processeur se réinitialise et le mode de veille est activé.

Voyant de fonctionnement	Voyant de panne	Erreur	Commentaires
Éteint	Clignote 2 fois	Débordement de pile	Problème au niveau du logiciel interne.
Éteint	Clignote 3 fois*	Pression trop élevée	Lors du traitement, le capteur de pression a relevé une pression supérieure à 30 cm H <sub>2</sub> O. Le tuyau de détection de la pression est peut-être débranché ou pincé. Cette erreur peut également être liée à un problème au niveau du capteur de pression ou du système électronique.
Éteint	Clignote 4 fois*	Aucune pression	Lors du traitement, le capteur de pression a relevé une pression d'environ 0 cm H <sub>2</sub> O. Un flexible de sortie est peut-être ouvert ou le tuyau de détection de la pression est peut-être débranché ou pincé. Cette erreur peut également être liée à un problème au niveau du capteur de pression ou du système électronique.
Éteint	Clignote 6 fois	Tentative de définition d'une heure incorrecte	Vous avez tenté de sélectionner une valeur incorrecte pour l'horloge en temps réel (HTR) du système. L'horloge en temps réel (real time clock, HTR) de l'appareil est configurée pendant le processus de fabrication. Cette erreur doit donc uniquement survenir à ce moment-là.
Éteint	Clignote 7 fois*	Capteur de pression hors plage	En mode de veille, le capteur de pression a relevé une valeur hors de la plage prévue. Le tuyau de détection de la pression est peut-être bloqué ou pincé. Cette erreur peut également être liée à un problème au niveau du capteur de pression ou du système électronique.
Éteint	Clignote 9 fois	Somme de contrôle du micrologiciel erronée	Au démarrage, l'appareil calcule la somme de contrôle du code du micrologiciel et la compare à la somme de contrôle calculée lors de la programmation initiale. Cette erreur indique que certaines parties du micrologiciel ont été corrompues. Une décharge électrostatique ou un problème matériel peut en être la cause.
Éteint	Clignote 11 fois	Ventilation bloquée	Lors du traitement, le système n'a pas pu détecter de mouvement de ventilation pendant deux secondes. Ce problème peut être dû à un moteur de ventilateur défectueux, à un connecteur de ventilateur desserré ou à un problème au niveau du système électronique.



Voyant de fonctionnement	Voyant de panne	Erreur	Commentaires
Éteint	Clignote 12 fois	Alimentation faible	Lors du traitement, le système a déterminé que la ventilation était bloquée (voir ci-dessus). Cependant, une vérification de la tension indique que l'alimentation disponible ne permet pas d'activer la ventilation. Ce problème peut être dû à une batterie ou à une alimentation défectueuse.
Éteint	Clignote 13 fois*	Surchauffe du processeur	Le capteur de température installé sur la puce du processeur a relevé une température excessive.
Éteint	Clignote 14 fois*	Surchauffe de la ventilation	La thermistance de la ventilation a relevé une température excessive.
* Vous devez alors vérifier que tous les tuyaux et flexibles sont correctement branchés. Si le problème est survenu pendant le traitement, vérifiez que le masque est correctement ajusté et qu'il n'y a pas de fuites. Vérifiez que tous les filtres sont correctement installés et qu'ils ne sont pas trop sales.			

## Codes d'alerte

Les alertes sont similaires aux anomalies mais elles ne réinitialisent pas le processeur lorsqu'elles surviennent, l'appareil poursuit le traitement.

Voyant de fonctionnement	Voyant de panne	Erreur	Commentaires
Éteint	Clignote 15 fois	Régulation impossible	L'appareil a détecté à plusieurs reprises que la pression régulée ne correspond pas à la plage déterminée pour le traitement. L'appareil tente de poursuivre le traitement. Cette alerte indique qu'il faut vérifier la propreté et l'ajustement des filtres et du masque.

## Rappel de changement du filtre

Tous les six mois, le voyant vert clignote pour vous rappeler que le filtre doit être remplacé. Le voyant clignote une seule fois lorsque l'appareil de CPAP est en mode de veille. L'appareil continue de fonctionner normalement. Vous devez procéder de la même manière que pour une panne : maintenez le bouton Marche/Arrêt enfoncé jusqu'à ce que le voyant vert cesse de clignoter. Le minuteur de rappel est alors réinitialisé (le rappel se déclenchera de nouveau dans six mois). Vous devez effectuer cette procédure lors du remplacement du filtre.

# Dépannage

Problème	Cause probable	Solution
Gêne liée à la sensation de forte pression	Il est possible que la pression de l'appareil soit trop élevée.	Respirez lentement par le nez avec la bouche fermée. Utilisez la pression de phase d'augmentation, le cas échéant. Si le problème de pression persiste, contactez votre fournisseur santé.
Irritation au niveau du nez ou de la gorge	Air sec	Faites en sorte que la pièce soit plus humide. Contactez votre fournisseur santé.
	Filtre d'air sale	Changez et/ou nettoyez le filtre.
Les voyants du panneau de commande de l'appareil Transcend ne clignotent ou ne s'allument pas lorsque l'alimentation est connectée à la prise d'entrée c.c.	La source d'alimentation n'est pas correctement branchée.	Vérifiez tous les branchements.
	Il est possible que l'alimentation secteur ne soit pas activée.	Utilisez une autre prise de courant. Vérifiez que la prise n'est pas commandée par un interrupteur mural.
Aucun débit d'air dans l'appareil Transcend	Défaillance du moteur de l'appareil ou défaillance du système électronique	Contactez le service technique de votre fournisseur santé.
Le voyant de panne jaune clignote pour indiquer une panne générale.	L'appareil détecte une erreur de fonctionnement.	Comptez le nombre de clignotements du voyant de panne jaune avant que la séquence ne se répète. Consultez la section <b>Codes d'anomalie, d'alerte et de rappel</b> pour trouver une solution. Si les voyants indiquent toujours une erreur alors que vous avez maintenu le bouton Marche/Arrêt enfoncé jusqu'à ce que le voyant de panne jaune cesse de clignoter, contactez le service technique de votre fournisseur santé.
Le système s'éteint pendant le traitement	Mauvaise herméticité du matériel externe (masque, adaptateur universel de tuyau, tuyau) ou utilisation de matériel externe dont la durée de vie recommandée est dépassée.	Contrôlez tous les équipements pour vérifier qu'ils sont bien hermétiques. Remplacez tout matériel externe dont la durée de vie recommandée est dépassée. Si le problème persiste, contactez le service technique de votre fournisseur santé.

## Annexe: références

Cette section couvre trois thèmes :

- **Pièces jetables**
- **Accessoires**
- **Pièces de rechange**

### Pièces jetables

Élément	Référence	Élément	Référence
Filtre d'entrée d'air (précédente version)	503003	Coussinet de protection de base (en option)	503009
Filtre	503067	Structure de filtre Transcend	503071
Échangeur chaleur/humidité (Heat Moisture Exchanger, HME) (en option)	503008	Coussinet frontal	503010

### Accessoires

Élément	Référence	Élément	Référence
Transcend H <sub>6</sub> B Waterless Humidification System	303005	Brassard pour batterie	503027
Transcend H <sub>9</sub> B Waterless Humidification System	303006	Étui pour batterie, batterie P <sub>8</sub>	503025
Batterie Transcend P <sub>8</sub> Multi-Night (BAT8)	503023	Étui pour batterie, batterie P <sub>4</sub>	503028
Batterie Transcend P <sub>4</sub> Overnight (BAT4)	503026	Station de base	503033
Adaptateur mobile (MPA1)	503029	LCD Programming Base Station	503055
Sangle de poitrine pour batterie	503024	Portable Solar Charger	503056

### Pièces de rechange

Élément	Référence	Élément	Référence
Transcend	503042	Coque du masque	503034
Support de tête Transcend H <sub>6</sub> B	503040	Lot de 3 brassards ajustables : S, M, L	503036
Support de tête Transcend H <sub>9</sub> M	503007	Cale frontale	503037
Fixations pour support de tête	503011	Flexible Transcend H <sub>9</sub> M	503038
Sac de transport Transcend	503012	Flexible Transcend H <sub>6</sub> B	503039
Bague adaptatrice Mirage Activa - S	503018	Adaptateur universel de tuyau	503043
Bague adaptatrice Mirage - M/L	503014	Lot d'adaptateurs de coque	503044
Bague adaptatrice Ultra Mirage II	503015	Alimentation universelle multiprise (PSA2)	503059
Bague adaptatrice ComfortGel – S/M	503016	Lot de fiches interchangeables	503060
		Bague adaptatrice ComfortGel - L	503017

## Annexe: spécifications

Cette section couvre les thèmes suivants:

- **L'appareil Transcend**
- **Alimentation universelle pour c.a. - PSA2**
- **Adaptateur mobile (en option) - MPA1**
- **Batteries**
- **Les performances de l'appareil Transcend**
- **Déclaration du fabricant**

### Transcend

Poids de l'appareil:	moins de 454 g
Dimensions de l'appareil:	15,4 cm x 8,9 cm x 7 cm
Dimensions du port du connecteur de sortie d'air:	connecteur propriétaire de 19 mm de diamètre
Dimensions du port de l'adaptateur universel:	connecteur de 22 mm de diamètre

### Alimentation universelle pour c.a. - PSA2

Entrée d'alimentation secteur:	100 - 240 V c.a., 50-60 Hz
Sortie d'alimentation secteur:	19 V c.c., 2,6 A

### Adaptateur mobile (en option) - MPA1

Entrée de l'adaptateur mobile:	Valeur nominale de 13,5 V c.c., 12 à 15,5 V c.c., 7 A
Sortie de l'adaptateur mobile:	19,2 V c.c., 3,91 A

### Batteries (en option) - BAT 4, BAT8

Batterie Transcend P <sub>8</sub> Multi-Night:	14,4 V c.c., 5 200 mAH
Batterie Transcend P <sub>4</sub> Overnight:	14,4 V c.c., 2 600 mAH

## Les performances de l'appareil Transcend

---

Plage de pressions de fonctionnement:	4 à 20 cm H <sub>2</sub> O
Précision de la configuration de la pression:	± 1 cm H <sub>2</sub> O ou ± 10 %, selon la valeur la plus élevée
Pression maximale d'arrêt du système :	30 cm H <sub>2</sub> O
Durée de la phase d'augmentation :	0 à 45 minutes + 25 % de fluctuation
Plage de températures de fonctionnement :	0 à 50 °C
Plage de températures de transport/ de stockage :	- 20 à 60 °C
Plage d'humidité de fonctionnement :	10 % à 80% d'humidité relative sans condensation
Plage d'humidité de transport/ de stockage :	10 % à 90% d'humidité relative sans condensation
Plage d'altitude :	0-2 438 m (ajustée automatiquement)

## Déclaration du fabricant

Cette section couvre les thèmes suivants:

- **Émissions électromagnétiques**
- **Immunité électromagnétique**
- **Conformité à la norme CEI 60601-1**

## Émissions électromagnétiques


Le système Transcend est conçu pour être utilisé dans l'environnement électromagnétique indiqué ci-après. Le client ou l'utilisateur du système doit s'assurer que l'appareil est utilisé dans un tel environnement.

Test d'émissions	Conformité	Environnement électromagnétique — conseils
Émissions à radiofréquences rayonnées CISPR 11	Groupe 1	Le système Transcend utilise l'énergie à radiofréquences pour son fonctionnement interne uniquement. Ses émissions à radiofréquences sont donc très faibles et peu susceptibles de causer des interférences avec les équipements électroniques présents à proximité.  Le système Transcend est adapté à une utilisation dans tous les établissements, y compris les habitations et les établissements directement connectés au réseau public basse tension qui alimente les bâtiments utilisés à des fins domestiques.
Émissions à radiofréquences conduites CISPR 11	Catégorie B	
Émissions d'harmoniques CEI 61000-3-2	Catégorie A	
Variations de tension/oscillations CEI 61000-3-3	Conforme	

## Immunité électromagnétique

Le système Transcend est conçu pour être utilisé dans l'environnement électromagnétique indiqué ci-après. Le client ou l'utilisateur du système doit s'assurer que l'appareil est utilisé dans un tel environnement.

Test d'immunité	Niveau de test CEI 60601	Niveau de conformité	Environnement électromagnétique — conseils
Décharge électrostatique CEI 61000-4-2	Contact $\pm 2, 4, 6$ kV  Air $\pm 8$ kV	N/A. Le système Transcend ne possède pas de surfaces conductrices. Air $\pm 2, 4, 6, 8$ kV	Les sols doivent être en bois, en béton ou en carrelage. Si les sols sont recouverts de matériau synthétique, l'humidité relative doit être d'au moins 30 %.
Décharge/transitoire électrique rapide CEI 61000-4-4	$\pm 2$ kV pour les lignes d'alimentation électrique $\pm 1$ kV pour les lignes d'entrée/de sortie	$\pm 2$ kV pour les lignes d'alimentation électrique  $\pm 1$ kV pour les lignes d'entrée/de sortie	La qualité d'alimentation de la ligne doit être similaire à celle d'un environnement hospitalier ou commercial typique.
Surtension CEI 61000-4-5	$\pm 1$ kV en mode différentiel $\pm 2$ kV en mode commun	$\pm 0,5^*$ , 1 kV en mode différentiel $\pm 2$ kV en mode commun	La qualité d'alimentation de la ligne doit être similaire à celle d'un environnement hospitalier ou commercial typique.
Baisses de tension, coupures brèves et variations de tension des lignes d'entrée d'alimentation électrique CEI 61000-4-11	$< 5\%$ $U_T$ ( $> 95\%$ de baisse en $U_T$ ) pour 0,5 cycle 40% $U_T$ (60% de baisse en $U_T$ ) pour 5 cycles 70% $U_T$ (30% de baisse en $U_T$ ) pour 25 cycles $< 5\%$ $U_T$ ( $> 95\%$ de baisse en $U_T$ pendant 5 secondes)	$< 5\%$ $U_T$ ( $> 95\%$ de baisse en $U_T$ ) pour 0,5 cycle 40% $U_T$ (60% de baisse en $U_T$ ) pour 5 cycles 70% $U_T$ (30% de baisse en $U_T$ ) pour 25 cycles $< 5\%$ $U_T$ ( $> 95\%$ de baisse en $U_T$ pendant 5 secondes)	La qualité d'alimentation de la ligne doit être similaire à celle d'un environnement hospitalier ou commercial typique. Si vous souhaitez que le système Transcend continue à fonctionner pendant une coupure de courant, nous vous conseillons de brancher la batterie.  <b>Remarque</b> $U_T$ est la tension d'alimentation c.a. avant application du niveau de test.
Champ magnétique à la fréquence du réseau (50/60 Hz) CEI 61000-4-8	3 A/m	3 A/m	Les champs magnétiques à la fréquence de réseau doivent posséder les caractéristiques de niveau d'un environnement hospitalier ou commercial typique.
Radiofréquences conduites CEI 61000-4-6	3 Vrms 150 kHz à 80 MHz	3 Vrms 10 KHz à 100 MHz*	Distance de séparation recommandée : $d = 1,17 \sqrt{P}$

Test d'immunité	Niveau de test CEI 60601	Niveau de conformité	Environnement électromagnétique — conseils
Radiofréquences rayonnées IEC 61000-4-3	3 V/m  80 MHz à 2,5 GHz	10 V/m (niveau de conformité ajusté pour respecter les limites de la FDA) 26 MHz à 2,5 GHz <b>Remarque</b> À 80 MHz et 800 MHz, la plage de fréquence la plus élevée s'applique.	Distance de séparation recommandée : $d = 0,35\sqrt{P}$ 80 MHz à 800 MHz Distance de séparation recommandée : $d = 0,70\sqrt{P}$ 800 MHz à 2,5 GHz où <b>P</b> est l'alimentation de sortie maximale du transmetteur en watts (W), d'après le fabricant, et où <b>d</b> correspond à la distance de séparation recommandée en mètres (m).  Les forces de champ des transmetteurs RF fixes, telles qu'elles sont déterminées par une étude du site électromagnétique, doivent être inférieures au niveau de conformité de chaque plage de fréquences.  Des interférences peuvent se produire à proximité des équipements portant le symbole suivant :  



## Conformité à la norme CEI 60601-1


Protection contre les décharges électriques:	Catégorie II Type BF IP22
Niveau de protection contre l'infiltration d'eau:	Cet équipement n'est pas compatible avec l'utilisation en présence d'un mélange anesthésique inflammable d'air ou d'oxygène ou avec du protoxyde d'azote.
Utilisation de gaz inflammables :	

## Caractéristiques physiques de l'interface

Poids de l'interface (masque/coque):	62 g
Espace mort du masque:	moins de 301 ml
Dimensions du flexible de 22 cm du système Transcend:	16 mm de diamètre, 20 cm de longueur
Dimensions du flexible de 15 cm du système Transcend:	16 mm de diamètre, 1,9 m de longueur
Dimensions du flexible de 15 cm du système Transcend:	21 mm de diamètre, 1,8 m de longueur

## Performances

Niveau de puissance acoustique (pour une pression statique de 10 cm H <sub>2</sub> O):	37,0 dB
Niveau de pression acoustique (pour une pression statique de 10 cm H <sub>2</sub> O):	29 dB
Résistance à la pression du masque et des accessoires:	0,140 hPa (cm H <sub>2</sub> O) pour 50 l/min 0,278 hPa (cm H <sub>2</sub> O) pour 100 l/min
Plage de pressions de fonctionnement:	4 à 20 cm H <sub>2</sub> O
Pression maximale:	30 cm H <sub>2</sub> O

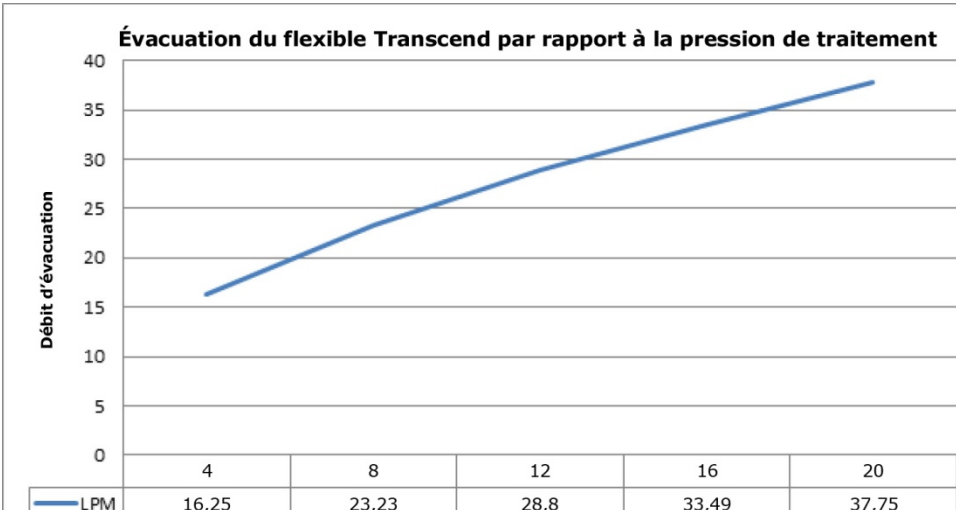Courbe de débits aux orifices de ventilation :	<div><div>Évacuation du flexible Transcend par rapport à la pression de traitement</div><table><tr><th></th><th>4</th><th>8</th><th>12</th><th>16</th><th>20</th></tr><tr><td>LPM</td><td>16,25</td><td>23,23</td><td>28,8</td><td>33,49</td><td>37,75</td></tr></table></div>							4	8	12	16	20	LPM	16,25	23,23	28,8	33,49	37,75
	4	8	12	16	20													
LPM	16,25	23,23	28,8	33,49	37,75													
Débit maximal (type) :		Pressions d'essai																
		4 cm H <sub>2</sub> O	8 cm H <sub>2</sub> O	12 cm H <sub>2</sub> O	16 cm H <sub>2</sub> O	20 cm H <sub>2</sub> O												
	Pression mesurée au port de connexion du patient (hPa)	3,1	7,0	11,0	15,0	19,0												
	Débit moyen au port de connexion du patient (l/min)	71,91	75,45	74,29	73,24	71,49												
Perte d'humidité du HME :	Condition d'essai																	
	Volume courant (ml)	Fréquence respiratoire (1/min)		Perte d'humidité (mg/l)														
	1000	10		18,5														
	750	12		18,6														
	500	15		15,6														
	250	20		12,2														
Baisse de pression du HME par rapport au débit :		Baisse de pression à l'inspiration (hPa)	Baisse de pression à l'expiration (hPa)															
	Débit (l/min)																	
	Au début	30	0,13		0,13													
	60	0,43		0,43														
	90	1,00		0,93														
Après 24 heures	30	0,17		0,17														
	60	0,50		0,47														
	90	1,10		1,07														
Volume interne	8,59 cm <sup>3</sup>																	

## Annexe: garantie limitée

---

Somnetics garantit que les systèmes Transcend sont exempts de tout défaut de matériaux ou de fabrication et fonctionneront conformément aux spécifications du produit pendant une période de deux ans, à compter de la date de vente par Somnetics au revendeur. Les packs de batteries Transcend P4 Overnight™ et P8 Multi-night™ sont garantis pour une période de 9 mois à compter de la date de vente par Somnetics au revendeur.

Si le produit ne fonctionne pas conformément aux spécifications, Somnetics choisira de réparer ou de remplacer tout matériau ou composant du système Transcend qui semblera défectueux après examen de Somnetics. Cette garantie ne couvre pas les dommages causés par un accident, une utilisation inappropriée, une mauvaise utilisation ou tout autre défaut non lié aux matériaux ou à la fabrication. Somnetics paiera les frais de transport usuels, de ses locaux à ceux du revendeur uniquement.

Somnetics décline toute responsabilité en cas de pertes économiques, de pertes de profits, de frais généraux ou de dommages consécutifs résultant de la vente ou de l'utilisation de ce produit. Certains pays/états n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou consécutifs ; il est donc possible que les limitations ou exclusions susmentionnées ne s'appliquent pas à vous.

Cette garantie remplace toute autre garantie explicite. De plus, toutes les garanties implicites, y compris les garanties de commercialisation et de compatibilité d'utilisation à des fins particulières, sont limitées à deux ans. Certains pays/états n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou consécutifs ; il est donc possible que les limitations ou exclusions susmentionnées ne s'appliquent pas à vous. Cette garantie vous confère des droits légaux spécifiques. Vous pouvez également disposer d'autres droits, qui varient selon les pays et les états.

Retournez l'appareil défectueux à Somnetics dans les 30 jours qui suivent la découverte du défaut pour bénéficier d'une réparation, d'un remplacement ou d'un remboursement. L'obligation de réparation, de remplacement ou de remboursement ne s'applique pas si l'appareil a été réparé ou altéré dans une infrastructure non homologuée par Somnetics. Pour faire valoir vos droits sous cette garantie, contactez votre revendeur Somnetics local homologué, écrivez à Somnetics, 33 5th Avenue, New Brighton, Minnesota 55112, USA ou composez le 1.877.621.9626 ou le 1.651.621.1800.

Somnetics International, Inc.  
33 5th Avenue NW, Suite 500  
New Brighton, Minnesota 55112 États-Unis

<http://www.mytranscend.com/>

Téléphone: 651.621.1800

Appel gratuit: 877.621.9626

Fax: 651.204.0064

Manuel d'utilisation du système de traitement des apnées du sommeil Transcend

**REF** 103259 Rev D